
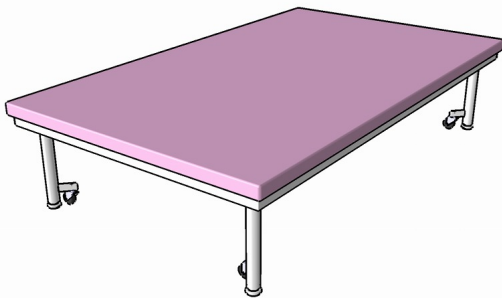


プラットホームマット

ワイド	SPR-545
ワイド・キャスター付	SPR-546
コンパクト	SPR-547
コンパクト・キャスター付	SPR-548

取扱説明書

ご使用になる前に	2
安全上のご注意	2
各部の名称	4
始業点検について	5
アジャスター	6
・高さの調節	6
・キャスターでの移動、設置（SPR-546,SPR-548のみ）	6
オプション品の取扱	7
日常のお手入れ	8
清掃	8
機器について	8
保守・点検	8
保証とアフターサービス	9
・保証書と保証期間	9
・修理をご依頼いただく場合	9
・耐用期間	9
・保守用性能部品の保有期間	9
仕様	10

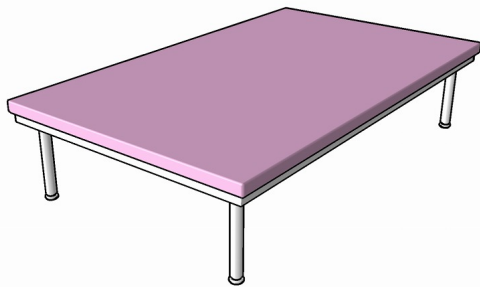

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- 「取扱説明書」は
 - ・1部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
 - ・1部を保存用として、大切に保管してください。

用 途

マット訓練を行うための、高床式マット台です。

特 長

●車椅子からアクセスしやすい高さ

車椅子の座面と同じ高さ（450mm）になっていて、移乗がしやすい設計です。

●清潔に保てるマット

マット表面には当社が独自に抗菌加工、フッ素防汚加工を施しています。

●移動が簡単（キャスター付きタイプ）

キャスター付きのタイプは移動が簡単に行え、室内を有効活用できます。

ご使用になる前に

安全上のご注意

機器を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

表示について

危険や損害の程度を以下に区分し、表示しています。



危険

取り扱いを誤ると、
「死亡または重傷を負うことに至る」
ことを示しています。



警告

取り扱いを誤ると、
「死亡または重傷を負う可能性が想定される」
ことを示しています。



注意

取り扱いを誤ると、
「傷害または物的損害の発生が想定される」
ことを示しています。

絵表示の意味



禁止

行為を禁止することを示した表示です。



強制

必ず実行していただくことを示した表示です。

ご使用になる前に／安全上のご注意

設置について

⚠ 注意

- ❗ **本機は必ず平らな場所に設置する**
故障やけがの原因となります。



使用について

⚠ 注意

- ⊘ **機器の改造をしない**
故障やけがの原因となります。
- ⊘ **用途以外の目的には使用しない**
故障やけがの原因となります。
- ❗ **軟質の床ではカーペットなどを敷いて使用する**
直に置くと床面を傷つけるおそれがあります。
- ❗ **キャスターの無い機器を移動する際は、2人以上で持ち上げる**
引きずると故障や、床を傷つける恐れがあります。
- ❗ **故障したら、ただちに使用を中止する**
そのまま使用すると、けがをする恐れがあります。
- ❗ **医師や指導者の指示に従って使用**
使用を誤るとけがをする恐れがあります。

ご使用になる前に

各部の名称

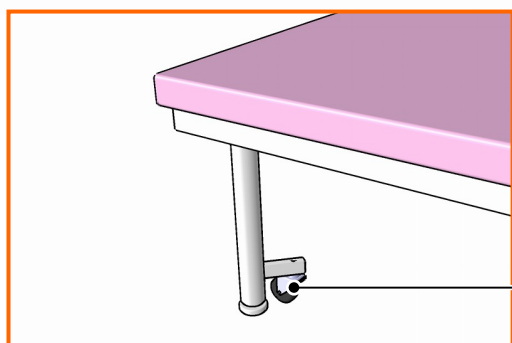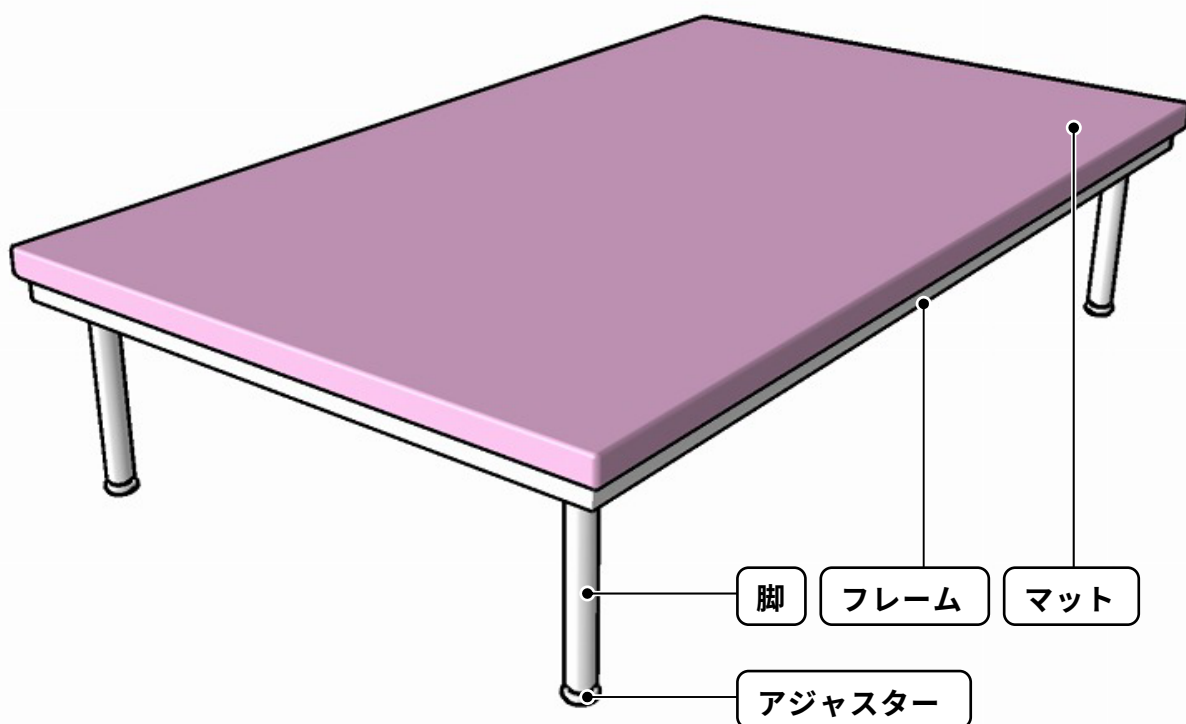

SPR-546, SPR-548 には、
脚にキャスターがついています。

キャスター


ご使用になる前に

始業点検について

ご使用前に下記の始業点検項目にもとづき、始業点検を実施してください。

①機器に汚れや損傷はありませんか。

②機器周囲に障害物はありませんか。

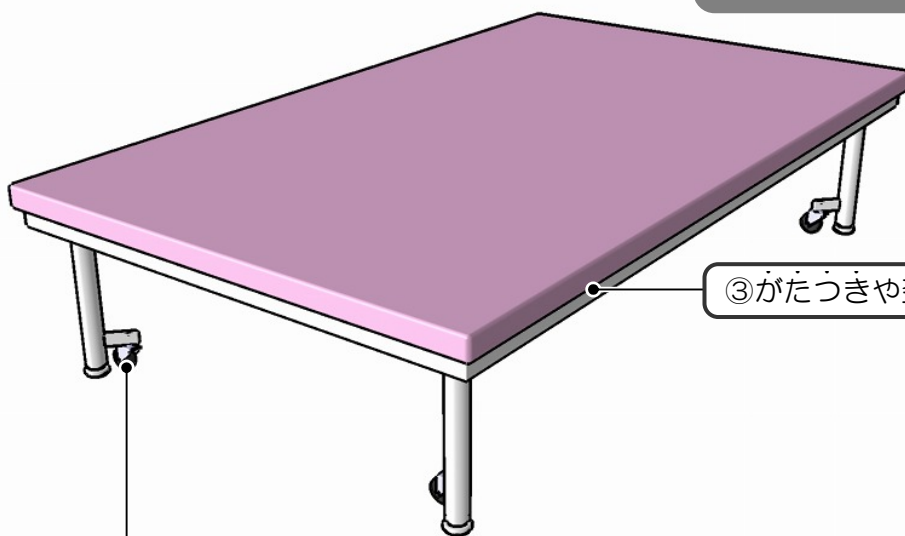

③がたつきや歪みはありませんか。 →P.6

④キャスターが完全に、地面から浮いていますか。 →P.6

始業点検チェックリスト

：点検の際は、本ページをコピーして使用ください。

プラットホームマット

点検日 年 月 日

項目	点検内容	点検方法	チェック	備考
①	機器の汚れ、損傷	目視	☐ OK・ ☐ NG	
②	障害物の有無	目視	☐ OK・ ☐ NG	
③	がたつきや歪みの有無	目視	☐ OK・ ☐ NG	
④	キャスターが完全に、 地面から浮いている (SPR-546,SPR-548 のみ)	目視	☐ OK・ ☐ NG	

またこれ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになられていたときとは違う異常を感じましたら使用せずに、最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

尚、故障中は故障した機器を誤って使用しないように、周囲の方が分かるように表示（故障中の貼り紙等）をお貼りください。


ご使用になる前に

アジャスター

・高さの調節

設置した機器に、がたつきや傾きがある場合にはアジャスターで調整を行ってください。



アジャスターは、回すことで伸縮します。

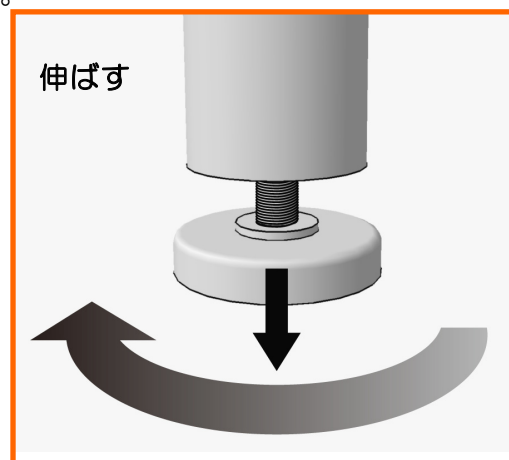

・キャスターでの移動、設置（SPR-546, SPR-548 のみ）


キャスターで移動させる場合、アジャスターを縮め完全に床面から離してください。
また移動後、設置の際にはキャスターを完全に床面から浮かせてください。

⚠ 警告 設置の際は、キャスターを完全に浮かせるようにアジャスターを調整する。

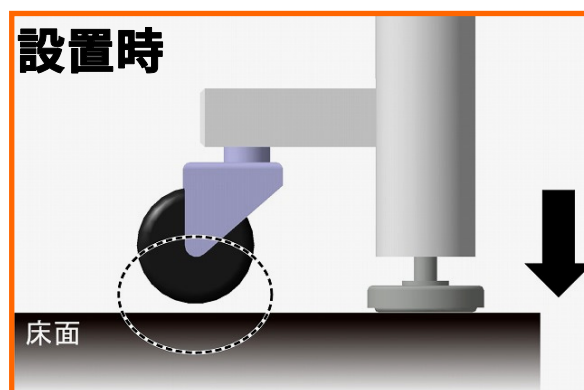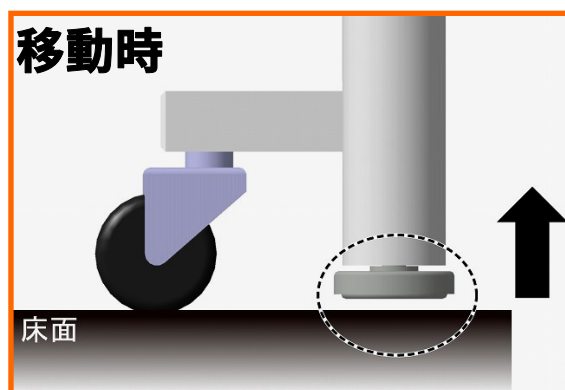


オプション品の取扱



エクササイズバー

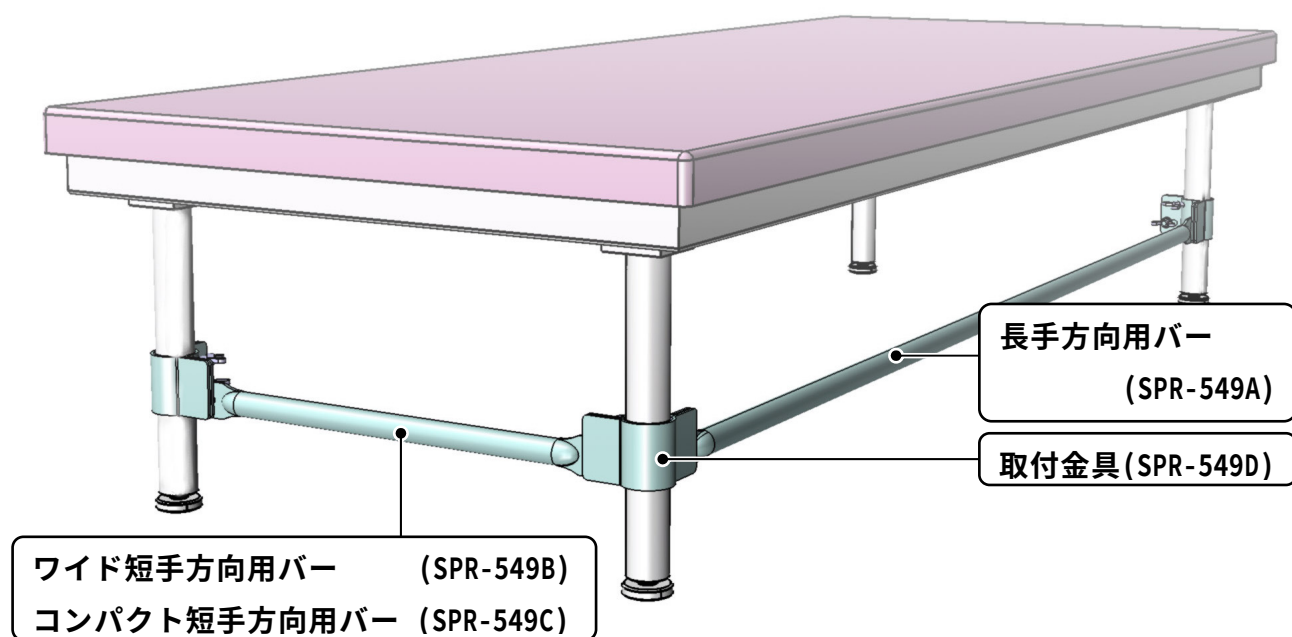

- ・ マットの脚部に補助フレームを追加できるオプションです。
- ・ ゴムバンドでの筋力訓練等にご活用ください。

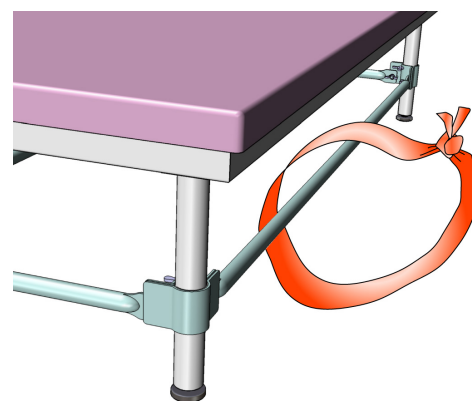

筋力トレーニング用ゴムバンドでの使用例

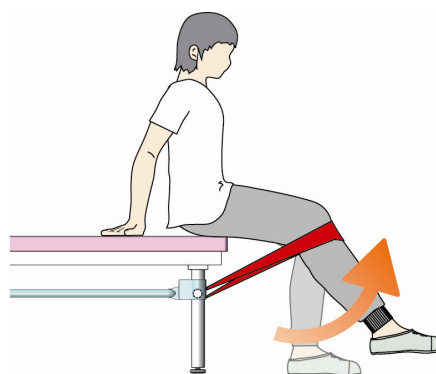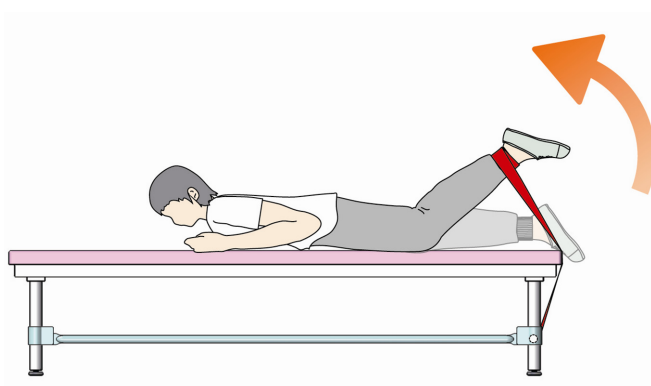

日常のお手入れ

清掃

- ・汗や汚れはすぐに乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。その後、乾拭きしてください。
- ・アルコール・シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- ・マットの縫い目は防水処理していませんので、水洗いはしないでください。
- ・タワシや磨き粉入りスポンジは塗装面やフレームを傷つけますので、使用しないでください。

機器について

保守・点検

- ・本機を使用する際は、機器の管理者の方が P.5 の点検項目に基づき、必ず始業点検（日常点検）を実施してください。
- ・長期間使用しなかった機器の使用を再開する場合は、正常な状態か十分な点検を行ってください。
- ・点検時に異常が発見された場合は、機器の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
- ・清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします。

機器について

保証とアフターサービス

・保証書と保証期間

- ・保証書(別添)は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管してください。保証書がないと保証期間中でも有償修理とさせていただきます場合があります。
- ・保証期間は1年です。本体フレームは5年間です。保証の規定につきましては保証書をご覧ください。

・修理をご依頼いただく場合

- ・修理をご依頼いただく場合は、下記のことをお知らせください。
機種名 : SPR-545、SPR-546、SPR-547、SPR-548
お買い上げ : 年 月 日
故障状況(できるだけ詳細に)
住所、氏名、電話番号
- ・メーカーより指示のあるとき以外は、機器を分解しないでください。

・耐用期間

10年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

・損耗品（使用により、磨耗・劣化・変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

- ・正常な使用において、交換の目安が約2年のもの。

マット

損耗品の交換時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

・保守用性能部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後10年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

機器について

仕様

型 式		SPR-545	SPR-546	SPR-547	SPR-548
外形寸法 (L×W×H)		2000×1200×450 mm		2000×800×450 mm	
質 量		約 65 kg		約 45 kg	
キャスター		-	φ50 (4 ヲ所)	-	φ50 (4 ヲ所)
材 質	マット	ビニールレザー (抗菌処理、防汚用表面フッ素処理)			
	フレーム	スチール、メラミン焼付塗装			
付属品		結束バンド、スパナ			

注. 都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。